


MOLE REMOVAL PEN INSTRUCTIONS

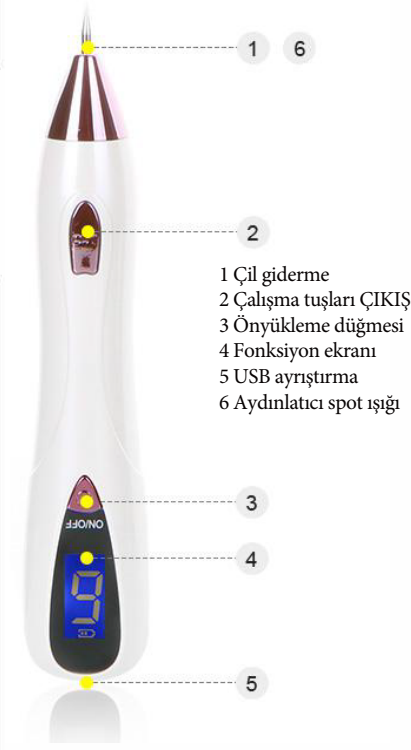

Leke Temizleme Başlığı

Mole Temizleme kalemı


Karbon iyonizasyon teknolojisine sahip olan bu Deri Etiketli Çıkarma Kalemı, rahatsız edici bir elektrik şoku olmadan benleri ve çilleri güvenli, etkili ve sorunsuz bir şekilde çıkarabilir.




İğne Karşılaştırması:

1. Kalın iğne (tekrarlı kullanım için): Daha büyük benler, çiller, siğiller vb. üzerinde kullanın. Bu daha sağlam ve güçlü iğne lekeleri hızlı bir şekilde yok edebilir.

2. İnce iğne (tek kullanımlık): Nispeten küçük benler, çiller ve diğer lekeler üzerinde kullanım içindir. İnce iğne daha az acı verir ve detay çalışmaları için daha iyidir.

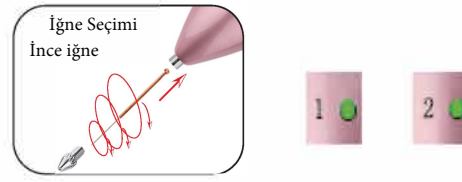

İnce iğne modu için Seviye Seçimi 1 veya 2'yi kullanın

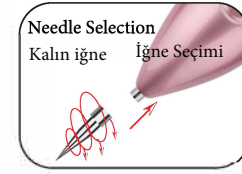

Kaba iğne modu için Seviye Seçimi 3-4'ü kullanın



Önlemler: Kullanmadan Önce

1. Kullanmadan önce iğneyi ve hedef cilt bölgesini alkolü bir ped ile dezenfekte edin.
2. Hassas kişiler için veya daha yüksek güçler kullanıldığında, lekeleri çıkarmadan önce hedef bölgeye uyuşturucu krem (dahil değildir) uygulanabilir.
3. İlk beninizi veya cildinizi almadan önce, kalemlerin işlevlerine ve kullanım sırasındaki hissasyata alışmak için daha az hassas bir bölgede kısa bir süre alıştırma yapmanız tavsiye edilir.
4. Güç Seviyesini Belirleyin:
 - A. Daha küçük çiller ve benler için ayar seviyesi 1 ve/veya 2'yi kullanın.
 - B. Daha büyük lekeler için ayar seviyesi 3'ü kullanın.
5. Doğru kullanım için, bu kalem sadece cildin üst tabakasını hedef alarak her noktaya hafifçe dokundurun.
6. Leke boyunca hafifçe ileri geri süpürülmesi tavsiye edilir.
7. Daha derin benler için kalemi eğin ve birden fazla uygulama ile daha düşük bir güç kullanın.
8. İğne ile cildi delmeyin.
9. Bir bölgede/lekede çok uzun süre kullanmayın.

Önlemler: Kullanımdan sonra

1. Sabırlı olmak çok önemlidir.
1. Sabırlı olmak çok önemlidir.
2. Her seferinde bir uygulama / kullanım. Aynı bölgeye ikinci bir uygulama yapmadan önce uygulama yapılan bölgenin ilk uygulamadan sonra iyileşmesini bekleyin.
3. İyileşme dönemi boyunca güneşe maruz kalmayı minimumda tutun.
4. Küçük ve orta büyüklükteki lekeler için bir hafta sonra, uygulama yapılan alan üzerinde bir kabuk oluşacaktır. Yaklaşık 2 hafta sonra, kabuk doğal olarak çıkmalı ve lekenin tüm izleri kaybolacaktır.
5. Daha büyük benler ve çiller için iyileşme daha uzun sürebilir. Kalan herhangi bir renk değişikliği, pigmentin cildin daha derinlerinde olduğu anlamına gelir. Bu durumda bölge tekrar uygulama yapılabilir, ancak ilk uygulamanın tamamen iyileşmesini beklediğinizden emin olun.
6. Ayrıca, susuz kalmayarak ve sağlıklı yağ oranı yüksek gıdalar tüketerek genel sağlığınıza dikkat etmeniz hızlı bir iyileşmeye katkıda bulunacaktır. LE (bol su içmek, daha fazla sebze, narenciye ve kuruyemiş yemek)
7. Öte yandan, zencefil, siğir eti ve soya sosu gibi tuz oranı yüksek gıdaların tüketilmesi iyileşme döneminde önerilmez.
8. Leke uygulamasından sonraki 1 hafta içinde şarap içmeyin veya aspirin (veya benzeri ilaçlar) almayın. Çünkü bunlar kanınızı incelten kimyasallar içerir.
9. Deride yara oluşmasını önlemek için ben/çil çıkarıldıktan sonraki 1 hafta içinde aşırı terlemeye neden olan yorucu egzersizlerden kaçınılmalıdır.
10. Kortizon veya aloe Vera gibi bir çeşit iyileştirici krem uygulanması iyileşmeye daha fazla yardımcı olabilir.

Tavsiye Edilenler

1. İlk kez kullananlar için, yüzünüz gibi hassas ve narin bir bölgede kullanmadan önce cihazı elinizin arkasında test etmeniz önerilir,
2. Her zaman çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
3. 1-2 hafta boyunca yaranın üzerine su dökmekten kaçının. Yara çok nemli kalırsa iltihaplanabilir.
4. Leke uygulaması sonrasında kalan kabukları koparmayın.
5. Sabırlı olun ve doğanın akışına bırakın.
6. Lekenin büyüklüğüne bağlı olarak iyileşme süreleri 2-10 hafta arasında değişebilir.

Kullanım Talimatları

Lekeyi temizleme:

Lekeleri çıkarmak için, lütfen ben çıkarma aletini lekeye hafifçe dokunarak yerleştirin, hafifçe ileri geri sürükleyin, melaninin yandığı ve düşeceği açıkça görülebilir. Küçük lekeler için sadece bir kez yapılabilir. Daha koyu lekeler için karbonizasyonun 2-3 kez yapılması önerilir. Mümkün olduğunca hareketsiz kalın ve işlem sırasında cihazı tutan eli dengede tutun, aksi takdirde yanmaya neden olur, ayrıca yaranın iyileşmesini etkiler ve yara izine neden olur. Çıkarma işlemini yapan kişinin, lekeyi çıkaran kişiden BAŞKA BİR KİŞİ OLMASI tavsiye edilir.

Nokta benini çıkarmak:

Nokta benini çıkarırken, lütfen benlerin boyutunu ayırt etmeye dikkat edin. Bazı benler cilt epidermisinde büyürken, diğerleri siğirdir. Benin yüzeyini bir kerede delmeyin, küçük gruplar halinde yakmak daha iyidir.

Kötü ben için, lütfen işlemden sonra yaranın iltihaplanmasını önleyin, yaranın iyileşmesinin ilk 2-3 günü için biraz uyuşturucu krem sürülmesi tercih edilir.

Not: Yara iltihaplanırsa uyuşturucu krem kullanmayı bırakın.

Granülasyonu Kaldırmak:

Lütfen türetilmiş granülasyon hücrelerini yakmak için granülasyona kalem ucuyla hafifçe dokununuz. Bir haftalık bir süre içinde otomatik olarak düşeceklerdir.

Küçük granülasyon için sadece bir kez çıkarılabilirken, daha uzun iyileşmeyi önlemek için daha geniş alanlarda daha büyük veya daha sert granülasyonu çıkarmak için birden fazla işlem kullanılmalıdır.


Dövmeleri çıkarmak:

Not: Bu cihazın sadece küçük dövmelerde kullanılması tavsiye edilir, 5 cm'den büyük dövmeler için profesyonel müdahalesine başvurulması önerilir.


Küçük dövmeler için birden fazla işlem gerekecektir ve bu işlem, kullanımlar arasında bölgenin iyileşme sürelerine izin vererek daha uzun bir süre boyunca yapılmalıdır. Herhangi bir yara izini önlemek ve kullanımlar arasındaki iyileşme süresini uzatmaktan kaçınmak için bu kılavuzda listelenen tüm önlemlere uydunuzdan emin olun. 3 cm'den büyük alanlar için kaba iğneyi kullanın.

Şiddetli iltihaplanma durumunda lütfen derhal hastanede muayene olun.


İşlem Adımları:

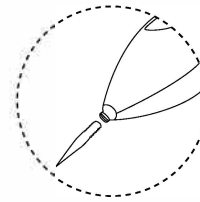


1. Uygun iğneyi seçin ve kalem ucuna takın.

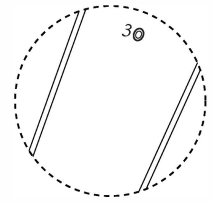

2. Kalemi açmak için ON/OFF düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın.

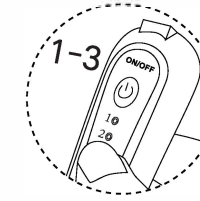

3. Hız seviyesini seçmek için ON/OFF düğmesine tıklayın.

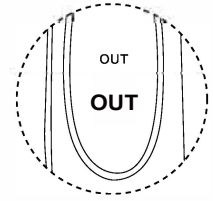

4. Çalışmaya başlamak için OUT tuşunu basılı tutun.

Üretici Firma :

Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.
2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA

Made in China