



Intense Pulsed Light
Yüz Masaj Aleti
ES-1081

Fonksiyon Tanıtımı

Bu ürün, pozitif iyon, negatif iyon, yüksek frekanslı titreşim, kırmızı ışık, mavi ışık ve yeşil ışığı entegre eden ılık bir sıcaklıkta cildi temizlemek, EMS bakımı yapmak ve cildi nemlendirmek için kullanılabilir.

*Pozitif ve negatif iyonlar: Pozitif ve negatif iyonlar arasındaki zıt yüklerin birbirini çekmesi prensibinden yararlanarak, bio elektrik akımları yoluyla derin gözeneklerdeki kiri türetir ve derinlemesine temizler; kozmetik bileşenler iyon girişi yoluyla derin cilde nüfuz eder.

*Titreşim: Mekanik titreşim ve voltaj uyarımı yöntemlerini benimseyerek insan cildinin sıkılaşmasını ve elastikiyetini artırmasını ve cildin metabolizmasını artırmasını sağlar.

*Tepidite: Tepidite masajı emilimi teşvik eder, cilt dokusunu gerer ve cildin dolgunlaşmasını sağlar.

*Kırmızı ışık: Derin cilde etkili bir şekilde nüfuz edebilir, kolajeni canlandırabilir, karanlığı giderebilir ve ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltabilir.

*Mavi ışık: Kolajen sentezini kolaylaştırabilir, cildi gençleştirir, sarkan cildi sıkılaştırır, cilt gözeneklerini arındırır ve yağlı ciltlerde, hassas ciltlerde ve akneli ciltlerde belirgin iyileşmeler görülebilir.

* Yeşil ışık; hücrelerin oksijen kullanımının alternatif işlevini geliştirebilir, cilt mikrosirkülasyonunu kolaylaştırabilir, lenf dolaşımını hızlandırabilir ve ödemi azaltabilir ve cildi stabil bir duruma getirebilir.

Ürün Özellikleri

Temizleme ve dışa aktarma modu (CLEAN)

* Derin gözeneklerdeki kiri temizler, gözenekleri küçültme, renk lekelerini soldurma ve sivilceleri giderme işlevlerini yerine getirir ve cildin koyu renk ve cansızlık sorununu çözer.

EMS bakım modu (EMS)


*Cilt bakım ürünlerini iyice tanıtın, cilt aktivitesini güçlendirin ve cilt gençleştirme, cildi beyazlatma ve kırışıklıkları azaltma etkilerini gerçekleştirin. Tepidite ve nem modu.

Isıtmalı Aktarma Modu (HOT)

*Nem masajı cilt dolaşımını destekler, cildin sıkılığını ve esnekliğini artırır ve cildin parlaklığını ve aktivitesini geri kazanmak için cildi uzun süre en iyi durumda tutar.

Göz Bakım Modeli.

Ürün Bileşenleri

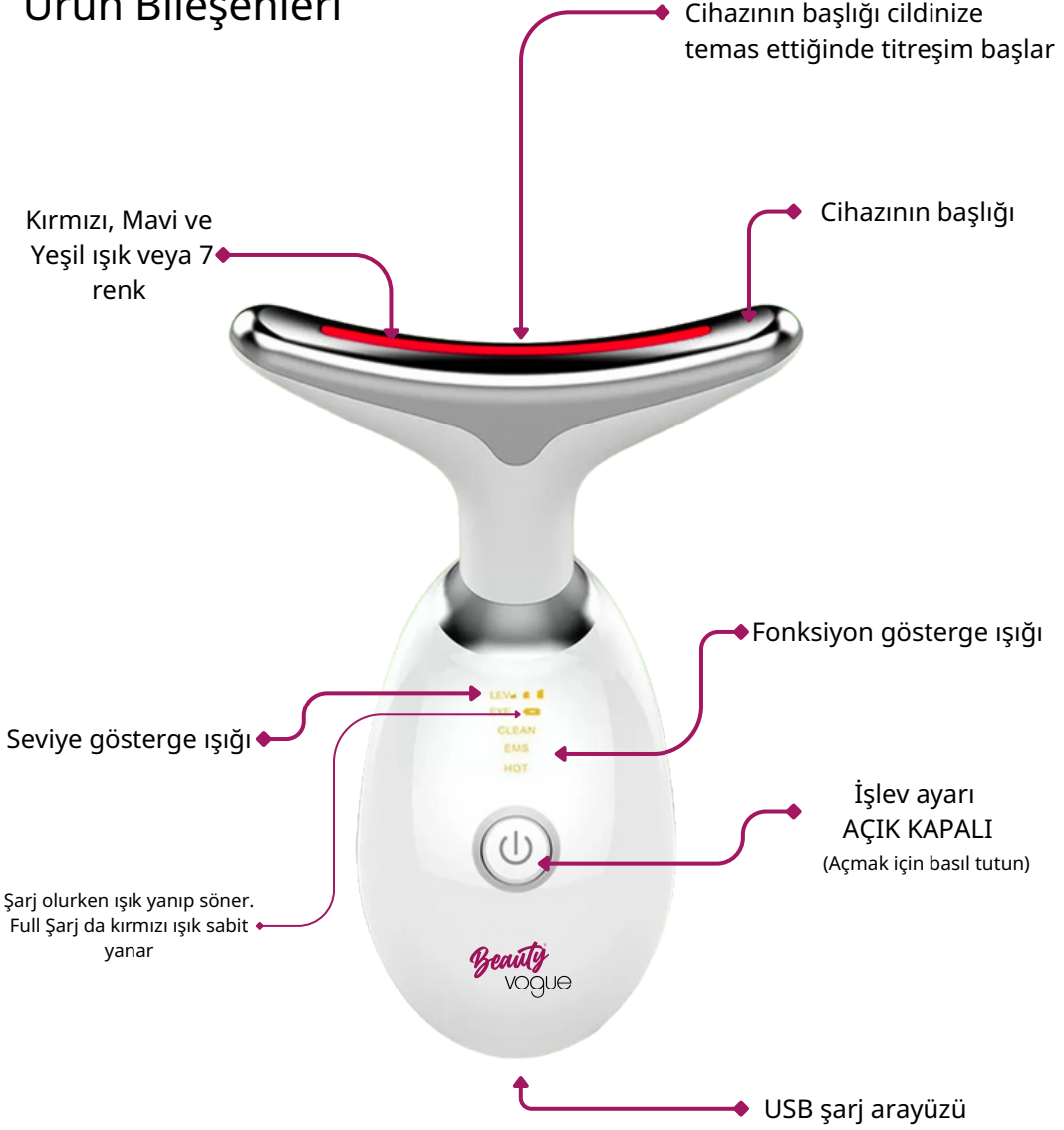

Kullanım Yöntemleri:

1. Temizleme ve aktarım modu yöntemlerini kullanma (Yeşil LED)

*Bu mod gözeneklerdeki kiri etkili bir şekilde temizleyebilir ve cildin yarı saydam hale gelmesini sağlayabilir; lütfen çok kalın pamuklu pedler kullanmamaya dikkat edin.

*Yeşil ışıkla birlikte, hücrelerin oksijen kullanımının alternatif işlevini geliştirebilir, cildin mikro sirkülasyonunu kolaylaştırabilir, lenf dolaşımını hızlandırabilir ve ödemi azaltabilir ve cildi stabil bir duruma getirebilir.

- (1) “ CLEAN” moduna girmek için düğmeyi yaklaşık 1 saniye basılı tutun (yeşil ışık eşliğinde)
- (2) Makyaj temizleyiciyi veya diğer temizleme losyonlarını cilde eşit şekilde uygulayın (alet gövdesi su geçirmez değildir, lütfen üzerine doğrudan su püskürtmeyin)
- (3) Metal indüksiyon çubuklarını iki taraftan tutun (gerçek iyon alma ve vermeyi gerçekleştirmek için insan vücudu ile bir döngü oluşturur)
- (4) Alet başlığını yüz veya boyun üzerinde aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirin

2. EMS bakım modu özelliklerini kullanma (Kırmızı LED)

* Bu mod cildi etkili bir şekilde uyarabilir ve rahatlatılabilir ve cilt bakım ürünlerinin derin cildi nemlendirmesine yardımcı olabilir; pamuk ped sabitleme halkası çıkarılabilir. (Hafif bir elektrik akımı hissi vardır) Bu normaldir herhangi bir zararı yoktur.

*Kırmızı ışıkla birleştiğinde cildin derinlerine etkili bir şekilde nüfuz edebilir, kolajeni canlandırabilir, koyuluğu giderebilir ve ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltabilir.

- (1) Başlamak için düğmeyi yaklaşık 1 saniye basılı tutun ve “EMS” moduna girmek için düğmeye tekrar basın (kırmızı ışık yanar)
- (2) Günlük kullanım için tonik veya losyonu cilde eşit şekilde uygulayın
- (3) Metal indüksiyon çubuklarını iki taraftan tutun (gerçek iyon alma ve vermeyi gerçekleştirmek için insan vücudu ile bir döngü oluşturur)
- (4) Alet başlığını yüz veya boyun üzerinde aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirin


3. HOT Sıcak içe aktarma modu yöntemlerini kullanma (Mavi LED)

* Bu mod cildi nazikçe uyandırıp rahatlatabilir ve cildin parlaklığını ve canlılığını geri kazanmasına yardımcı olabilir.

* Mavi ışık ile birlikte kolajen sentezini kolaylaştırabilir, cildi gençleştirebilir, sarkan cildi sıkılaştırabilir, cilt gözeneklerini arındırabilir ve yağlı ciltlerde, hassas ciltlerde ve akneli ciltlerde belirgin iyileşmeler görülebilir.

- Başlamak için düğmeyi yaklaşık 1 saniye basılı tutun ve "HOT" moduna girmek için düğmeye iki kez basın (mavi ışık yanar)
- Maskeyi yüze veya boyuna uygulayın
- Metal indüksiyon çubuklarını iki taraftan tutun (gerçek iyon alma ve vermeyi gerçekleştirmek için insan vücudu ile bir döngü oluşturur)
- Alet başlığını yüz veya boyun üzerinde aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirin.

Önerilen Kullanım Yöntemleri:

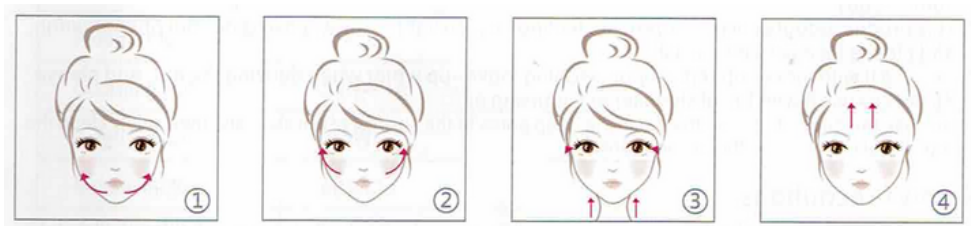

1. Çeneden yanağa doğru hareket ettirin
2. Yanaktan dış kantusa kadar hareket ettirin
3. Boyundan çeneye kadar hareket ettirin
4. Çeneden yukarıya hareket ettirin

Kullanılan Cihaz için Notlar:

1. Cihazı açmak için güç düğmesine uzun süre basın; şarj olurken kullanılamaz.

Ürün Parametresi

2. Kullanım sırasında, parmaklar cihazın iki tarafındaki indüksiyon çubuğunu tutar ve insan vücudu ile bir döngü oluşur.

3. Bu ürün mikro akım iyon teknolojisini kullanır, bu nedenle elektrik akımı hissi normal bir olaydır ve lütfen onu kullanacağınızdan emin olun.

4. Kiri çıkarırken makyaj temizleyici veya makyaj temizleme suyu ile birlikte kullanın ve lütfen yüz temizleyici veya temizleme yağı ile birlikte kullanmayın.

* Önce derin gözeneklerdeki kiri cilt yüzeyine çıkarmak için cihazı kullanın ve ardından yüz temizleyiciyi kullanarak yalnızca yüzeysel kiri temizleyin.

Güvenlik Önlemleri:

1. Yüz plastik ameliyatı, deri altı metal implant geçirmiş kişilerin ve hamile veya regl döneminde olanların bu ürünü kullanması genellikle tavsiye edilmez.

2. Giriş başlığını peçeteyle silin, suyla yıkamaktan ve metallere dokunmaktan kaçının.

3. Lütfen banyoya veya diğer nemli yerlere koymayın, çünkü kısa devreye neden olması kolaydır.

4. Her mod günde yalnızca bir kez kullanılabilir ve üç modun her gün bir kez art arda kullanılması önerilir.

5. Sadece yüz ve boyun bakımları içindir, çiçek, akne ve kızarıklık önleyicidir. Alerjik cilde sahip kişilerin bu ürünü her gün kullanması tavsiye edilmez, ancak haftada bir kez uygundur.

* Ürünün bakıma ihtiyacı olduğunda, lütfen önce gücün kapalı olduğunu emin olun. Aksi takdirde, ıslak kağıt havlu veya havlu ile bakımı yapıldığında elektrik çarpması olasılığı vardır.

* Lütfen cihazı suyla yıkamayın ve silmek için ıslak kağıt havlu veya biraz sabun sıvısına batırılmış yumuşak bir bez kullanılabilir; pamuk ped sabitleme halkası doğrudan temiz suyla yıkanabilir.

* Lütfen cihazı silmek için aşındırıcı çözelti (alkol, hayvansal bitkisel yağ, benzin, oje çıkarıcı vb.) kullanmayın, bu ürünün arızalanmasına veya bileşenlerin çatlamasına, renginin solmasına ve diğer nedenlere yol açabilir.

Ürün Özellikleri

Markası	Defond
Ürün model No.	ES-1081
Şarj voltajı	5V = 1A
Nominal güç	2.5W
Batarya model No.	602535
Batarya parametresi	3.7V 500mAh
Şarj süresi	2 Saat
Ürün boyutu	89*47*120MM
Genel standart	GB 4706.1-2005 GB4706.15-2008
Çalışma süresi	4 dakika bekledikten sonra bekleme moduna geçecek ve 1 dakika daha çalışmadığında otomatik olarak kapanacaktır.



Üretici Firma :

Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.

2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA

İthalatçı Firma :

DEFOND ELEKTRİK TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:13 Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜNVANI: DEFOND ELEKTRİK TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD. NO:13 KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :

DEFOND ELEKTRİK
TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cad. No: 13
Tel : 0842 255 42 42 50 Karatay/KONYA
Sic. No: V.D. 272 18 1765 - T. Sic. No: 71645

Azami Tamir Süresi : **30 Gün**

Garanti Süresi : **1 Yıl**

Belge Numarası : **Fatura no baz Alınır**

Belge Tarihi : **Fatura tarihi baz alınır**

Markası : **Defond**

Modeli : **ES-1081**

Cinsi : **Yüz Masaj Aleti**

SATICI FİRMANIN :

Ünvanı :

Adresi :

Tel :

Fatura Tarihi ve Numarası :

Tarih :/...../202...

İmza :

KAŞE

DEFOND

GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar.
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşulları.
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler).
4. **SU SIÇRAMALARI** Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar.
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.).
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar.
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar.
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2]
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

DEFOND